

Radical-7[®] Pulse CO-Oximeter[®]

Incluye cooximetría de pulso Masimo rainbow SET™ en un monitor versátil y actualizable



Oximetría de pulso

SpO₂

PR

Pi

Cooximetría de pulso actualizable

SpHb⁺

SpMet⁺

SpCO⁺

SpOC⁺

ORi⁺

RRp⁺

PVi⁺

Monitorización acústica

RRa⁺

Se adapta a las necesidades cambiantes de monitorización

Dispositivo 3 en 1 que puede usarse como monitor a pie de cama o portátil, o durante el transporte



Características

Batería recargable

- Duración de la batería de 4 horas para la monitorización prolongada cuando se usa como dispositivo portátil

Opciones de conectividad

- Conectividad inalámbrica integrada a través de radio 802.11 y Bluetooth®

Interfaz de usuario intuitiva

- Navegue y configure los valores fácilmente a través de la pantalla multitáctil de alta definición

Creación de registros electrónicos

- Documentación automatizada de los datos del paciente mediante una interfaz con el sistema de registros médicos electrónicos (EMR) del hospital a través de Patient SafetyNet™ o Iris Gateway™

Forma de onda pletismográfica


- La forma de onda pletismográfica de alta resolución y la forma de onda de frecuencia respiratoria acústica (RRa) opcional brindan visibilidad en tiempo real

Rotación automática de parámetros visualizados

- Pantalla versátil que se ajusta automáticamente según la orientación del dispositivo

Actualización perfecta a Root®


- Capacidad de acoplamiento con la plataforma de conectividad del Root para la monitorización del paciente

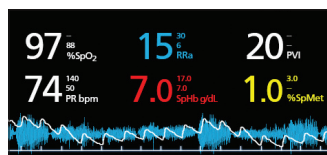


Personalice la pantalla para ver los parámetros de más alta prioridad en su entorno clínico



Utilice movimientos sencillos para mover, expandir o colapsar **las tendencias en los parámetros**, para analizarlas más a fondo

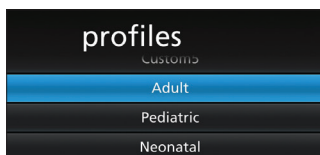

Configure los parámetros y las alarmas según la población de pacientes, con la opción de seleccionar uno de los **Perfiles de paciente** preconfigurados

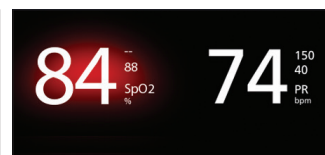

Alarmas audibles y visuales para la identificación rápida de los parámetros que dispararan las alarmas, con un sistema de altavoces redundante

Especificaciones del Radical-7

BATERÍAS DEL DISPOSITIVO PORTÁTIL

Tipo	Ion de litio
Capacidad (duración de las baterías)	4 horas ¹
Tiempo de carga	3 horas

CONDICIONES AMBIENTALES

Temperatura de funcionamiento	0-50 °C (32-122 °F)
Altitud de funcionamiento	Presión de 500-1.060 mBar

CARACTERÍSTICAS FÍSICAS

Dimensiones	22,6 cm x 8,9 cm x 5,3 cm (8,9" x 3,5" x 2,1")
Autónomo	8,9 cm x 26,7 cm x 19,6 cm (3,5" x 10,5" x 7,7")

PESO

Dispositivo portátil	0,54 kg (1,2 lb)
Estación de acoplamiento (modelos RDS-1, 2 y 3)	1,14 kg (2,5 lb)
Autónomo (modelos RDS-1, 2 y 3)	1,73 kg (3,8 lb)

¹ Esto representa un tiempo de operación aproximado con el menor brillo del indicador y el tono de pulso apagado, usando una batería totalmente cargada.

* La marca comercial Patient SafetyNet se utiliza bajo licencia de University Health System Consortium.

RRp y ORI han obtenido la marca de certificación CE. No disponible en los Estados Unidos de América.

Para uso profesional. Consulte las instrucciones de uso para obtener información completa de prescripción, que incluye indicaciones, contraindicaciones, advertencias y precauciones.

Masimo U.S.
Tel: 1 877 4 Masimo
info-america@masimo.com

Masimo International
Tel: +41 32 720 1111
info-international@masimo.com

